


A HypnoPTT készülék működtetésének szabályai

1. A készüléket az ágy mellé, a földre célszerű elhelyezni, az érzékelők hosszú vezetékkel vannak ellátva, felérnek az fekvőhelyre.
2. az érintkező csatlakozók biztosítékkal vannak ellátva, kihúzáskor ügyelni kell a kioldógomb benyomására (kivéve légáramlásmérő)
3. A pulzus oximetert az ujra (leggyakrabban a mutatóujra) a következőképpen helyezzük fel:




4. A törzskábel a mellkas-has határára rögzítendő az övvel. Ügyelni kell arra, hogy az érintkező csatlakozók felfele nézzenek. Az EKG-ról a műanyag védőfóliát húzza le, a képen látható helyre ragassza fel, lehetőleg szőrmentes területre. Az EKG-t ne rakja az öv alá! A mikrofon a szegycsont feletti bemélyedésbe kerül, rögzítéséhez 8-10 cm-es ragtapaszt használjon.

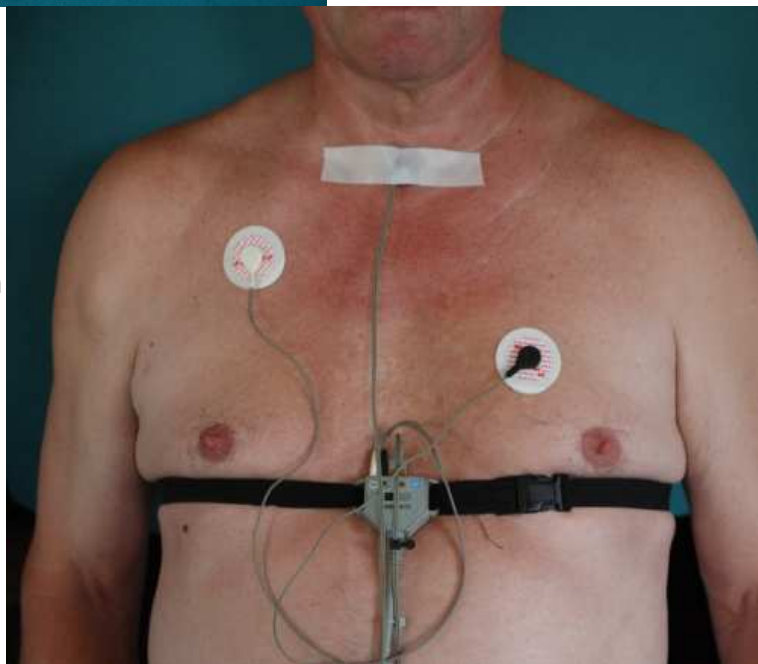

5. A légáramlásmérő az orrba helyezendő az alábbi módon:

A készülékbe az érintkező csatlakozók a következőképpen rögzítődnek:

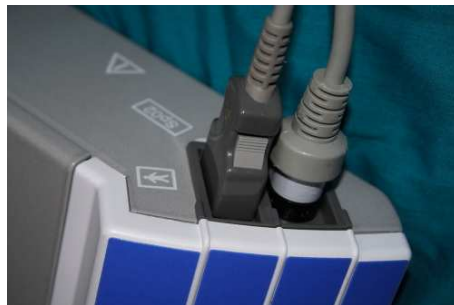

Ha éjszaka WC-re kell mennie, a hálózati kábel kivételével mindhárom csatlakozót húzza ki a gépből. A gép maradjon bekapcsolva. Visszaérkezéskor csatlakoztassa vissza a

géphez az érintkezőket. A gépet nem szabad újraindítani, sem pedig az előlapon lévő gombokat megnyomni.

Ha áramszünet lépne fel éjszaka, akkor se nyúljon a készülékhez, hagyja bekapcsolt állapotban.

Próbálja alvással tölteni az éjszakát. Mindent tegyen úgy, ahogy más esténként szokott. Ha pl. altatót szokott bevenni, akkor most is vegye be, ha meg szokott inni egy üveg sört, most is igya meg. Az a lényeg, hogy hiteles képet nyerjünk arról, mi történik az Ön szervezetében éjszakánként. Ez az éjszakai mérés semmilyen más napközbeni vizsgálattal nem helyettesíthető. Általában 4-6 órás alvás elegendő a diagnózis felállításához.

ENT House Budapest
07-70-3424298
www.enthouse.hu